



NuEra

Future Perfect

NuEra™ *tight*

Die neue Ära der intelligent
gesteuerten Erwärmung

Für straffe Haut, gegen Cellulite



Future Perfect für eine perfekte Zukunft

Jeder Tag ist ein Neuanfang und der Beginn einer neuen Zukunft. Jeder Tag ist eine neue Chance, uns für eine Zukunft mit einem attraktiven und gepflegten Aussehen und einem guten Gefühl zu entscheiden.

NuEra *tight* ist ein temperaturgesteuertes Hochfrequenzsystem zur Hautstraffung mit dem Potenzial, die Zukunft neu zu gestalten. Gezielt zu erneuern und zu regenerieren. Besserung und absolute Perfektion zu erreichen.

NuEra *tight* ist die perfekte Zukunft mit **Future Perfect.**



Eine neue Zukunft für Ihre Patienten. Und für Sie.

Willkommen in der neuen Ära der schnellen, effektiven und vielseitigen Behandlungsoptionen für Körper und Gesicht: NuEra *tight*.

NuEra wird präsentiert von Lumenis®, dem Pionier auf dem Gebiet der energiebasierten Technologien mit einer über 50-jährigen Innovationsgeschichte. NuEra gehört zur Produktfamilie BioRevital RF MED und ist mit der CE-Kennzeichnung für oberflächliche und tiefe HF-Erwärmung zur Behandlung problematischer Hautbereiche versehen. Behandlungsmöglichkeiten sind z. B. die temporäre Milderung des Erscheinungsbildes von Cellulite und die Kollagen-Remodellierung zur Straffung schlaffer Haut.

NuEra *tight* bedeutet...

Für Ihre Patienten:

- Natürlich aussehende Ergebnisse
- Angenehmes Gefühl
- Keine Ausfallzeit

Für Sie:

- Einfache Handhabung
- Breites Behandlungsspektrum
- Wirksamkeit


Freuen Sie sich auf eine neue Zukunft für Ihre Praxis.

Präzise Leistung mit vorhersagbaren Ergebnissen: Gezielte Hautstraffung von Kopf bis Fuß

NuEra *tight* ist eine nicht invasive HF-Lösung zur Gewebe-Remodellierung, Festigung schlaffer Haut und Verbesserung des Erscheinungsbildes von Cellulite und schlaffer Haut mit gleich bleibenden Ergebnissen und ohne Ausfallzeit.

NuEra *tight* sendet leistungsfähige HF-Wellen mit einer Frequenz von 470 kHz und einer hohen Leistung von 250 W aus, um die Hautoberfläche oberflächlich zu erwärmen oder tiefe Hautschichten zu erreichen. Die präzise Frequenz und die eingestellte Eindringtiefe ermöglichen eine effektive Behandlung problematischer Hautbereiche unterschiedlichen Schweregrads an Gesicht und Körper.

NuEra *tight* optimiert die Wirksamkeit der Behandlung auf Bauch, Hüften, Gesäß, Innen- und Außenschenkeln, Oberarmen und Fettpölsterchen unter den Achseln und am Rücken sowie in der Augen-, Mund-, Wangen- und Halspartie.

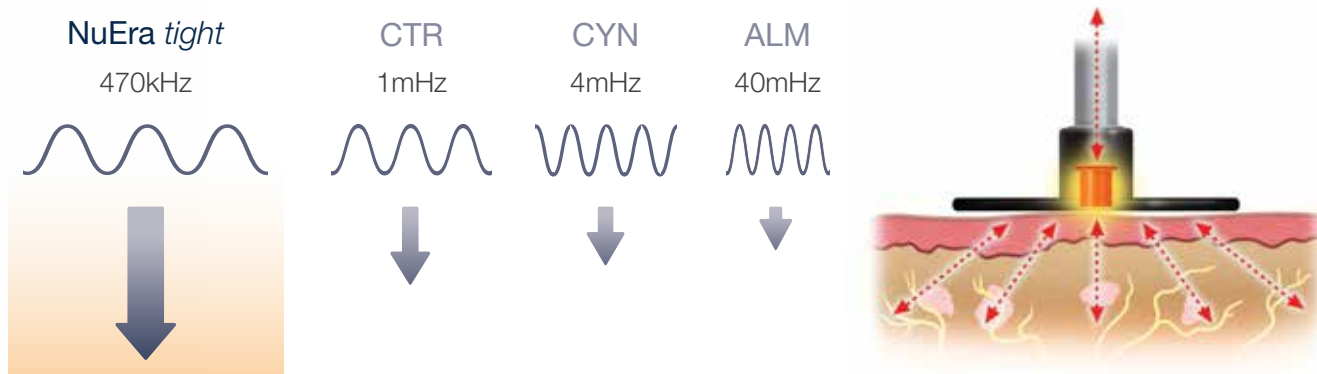


NuEra *tight* HF sendet Wellen mit einer niedrigen Frequenz von 470 kHz aus, um in tiefere Hautschichten einzudringen und einen besseren thermischen Effekt und möglichst optimale Ergebnisse zu erzielen.

Intelligente, temperaturgesteuerte HF-Technologie

Bei NuEra *tight* kommt APIC (Automatic Power and Impedance Control), die Temperatursteuerungstechnik der nächsten Generation, zum Einsatz. Sicherheit und Wirksamkeit sind so garantiert.

Basierend auf der Impedanzdetektion erhöht APIC die HF-Leistung automatisch und sukzessive auf die Zieltemperatur und hält diese über die gesamte Dauer der Behandlung. Dies gewährleistet eine präzise Hauterwärmung in der gewünschten Tiefe, sodass vorhersagbare und konsistente Ergebnisse erzielt werden.

Mit den leichten und ergonomischen Handstücken können Sie sich voll und ganz auf die Behandlung Ihrer Patienten konzentrieren, alles andere übernimmt das System.

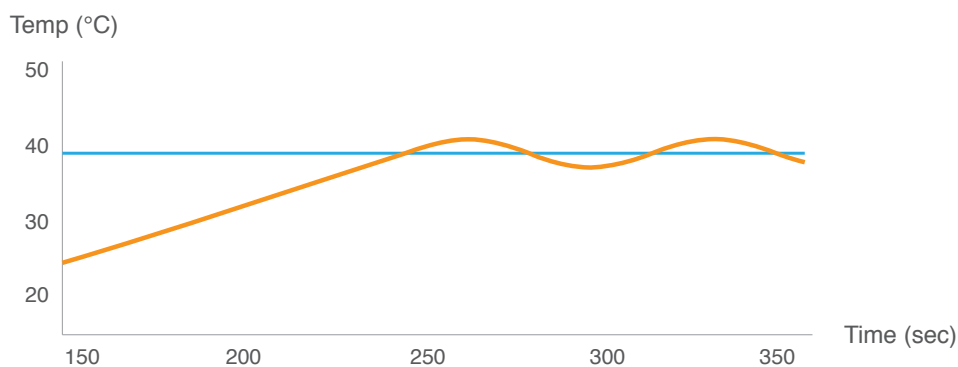

APIC überwacht in Echtzeit die Temperatur des Hautgewebes und die Impedanz. Sie passt die HF-Leistung automatisch an, sodass die Wärme nach Bedarf für jede spezifische Behandlung tiefer und gleichmäßiger eindringen kann.

Perfekte Präzision: So funktioniert NuEra *tight*

NuEra *tight* ist anwenderfreundlich: Für maximale Flexibilität der Behandlung ist das Gerät mit einer grafischen Benutzeroberfläche zur automatischen Konfiguration versehen.

Wählen Sie einfach den zu behandelnden Körper- oder Gesichtsbereich aus und das System stellt automatisch die korrekten Parameter ein und zeigt dann das richtige Zubehör und die entsprechende Behandlung an.

Stellen Sie NuEra *tight* auf eine gewünschte Zieltemperatur ein und setzen Sie die Elektrode des Geräts auf die Hautoberfläche. Führen Sie nun langsam wischende oder kreisende Bewegungen aus, sodass die Haut allmählich, gleichmäßig und sicher erwärmt wird. Für den Behandler wie für die Patienten ist diese Art der Behandlung gleichermaßen angenehm.

Während die Hauttemperatur langsam auf die Zieltemperatur ansteigt, passt die APIC-Technologie die Hochfrequenzleistung automatisch an, sodass eine durchgängig präzise Erwärmung gewährleistet ist. Die Behandlung ist schnell und effizient. Eine Gesichtsbehandlung dauert etwa 10 bis 15 Minuten, die Behandlung größerer Hautbereiche am Körper etwa 20 bis 25 Minuten.



Im Lieferumfang
enthaltenes Zubehör



Oberarm

Augen

Wangen

Kieferpartie

Kinn

Hals

Fett-pölsterchen
unter den
Achseln

und am
Rücken

Ellbogen

Bauch

Hüfte

Gesäß

Außenschenkel

Innenschenkel

Knie

Nehmen Sie die Zukunft Ihrer Patienten in Ihre Hände

Dank seiner beachtlichen Leistung von 250 W arbeitet NuEra *tight* ausschließlich mit einem resistiven bipolaren Handstück und zwei monopolaren Handstücken mit CCET-Elektroden zur kapazitiven Energieübertragung in Kondensatorköpfen unterschiedlichster Größe - von klein bis sehr groß. So können Sie alle Körperregionen schnell, sicher und effektiv behandeln und erzielen natürlich aussehende und gleichmäßig glatte Ergebnisse.

Nach der ersten Grundbehandlung können Ihre Patienten ohne Ausfallzeit sofort wieder ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen. Regelmäßige Touch-up-Behandlungen sorgen für ein dauerhaft schöneres Hautbild. Mit diesem auf eine langfristige Erhaltungstherapie ausgerichteten NuEra Behandlungskonzept können Sie Ihre Patienten dauerhaft an Ihre Praxis binden.

NuEra *tight* ist ein Behandlungskonzept in zwei Schritten:



Schritt 1. GetSmooth

Entsprechend den Wünschen und Zielen Ihrer Patientin führen Sie eine erste Behandlungsserie zur Grundbehandlung durch.

Schritt 2. StaySmooth

Mit regelmäßigen Touch-Up-Behandlungen erhalten Sie die Behandlungsergebnisse und binden Ihre Patienten langfristig an Ihre Praxis.

Das Ergebnis: perfekt und natürlich



Vorher



Nachher



Vorher



Nachher



Vorher



Nachher



Vorher



Nachher

Mit freundlicher Genehmigung von
Concita Muneratti, MD - Italien

Mit freundlicher Genehmigung von
Connie Casad, MD - Dallas, Texas, USA

Ihre Reise mit NuEra *tight* hat erst begonnen.

Wir möchten, dass Ihr Geschäft mit NuEra *tight* wächst. Deshalb haben wir für Sie ein Support-Paket geschnürt, das Sie auf Ihrer Reise begleitet: vom ersten Gespräch über die ersten Geschäftserfolge und darüber hinaus. Wir sorgen dafür, dass Sie alle erforderlichen Schulungen und stets die neuesten klinischen Informationen erhalten.



Lumenis Praxisfinder

Tausende Patienten suchen jeden Monat nach Behandlungsanbietern. Registrieren Sie sich im Lumenis Praxisfinder damit Ihre Praxis gefunden wird. Wir werben für dieses Verzeichnis mit Kampagnen über Influencer, in den sozialen Medien und mit viralen Videos.



Lumenis.com

Potenzielle Patienten haben zahlreiche Fragen zu ästhetischen Therapien und gynäkologischen Behandlungsoptionen, zum Teil herrscht große Unsicherheit. Unsere Patienten-Website beantwortet die wichtigsten Fragen und vermittelt die nötige Sicherheit und das Vertrauen, sich für eine Behandlung zu entscheiden und den nächsten Schritt zu tun.



Mitarbeiterschulungen

Wir installieren das System und schulen Ihre Mitarbeiter. Daher sind wir in der Lage, Hauttypen und Hauterkrankungen zu beurteilen und für jeden Patienten den perfekten individuellen Behandlungsplan zu erstellen. Selbstverständlich werden alle Beratungen und Behandlungen im Rahmen unserer klinischen Expertentrainings vertraulich behandelt.



Ihre wertvollste Ressource

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist nur eine E-Mail, eine Textnachricht oder einen Anruf entfernt. Wir möchten, dass Sie sich als ein Mitglied der Lumenis Familie fühlen und wissen, dass Sie sich mit allen Fragen jederzeit an uns wenden können. Wir sind bestrebt, jede Anfrage innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.



Brand Your Clinic

Als Lumenis Kunde haben Sie Zugang zum Lumenis Ärzteportal. Hier finden Sie verschiedenste Marketingmaterialien wie Broschüren und Poster und können auf umfangreiche klinische Daten und Produktinformationen zugreifen.



Best Practice Marketing

Von Ihrem persönlichen Ansprechpartner bei Lumenis erhalten Sie auf Anfrage Marketingpläne, die Sie speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zuschneiden können, von 90-Tage-Benchmarks für den Erfolg bis hin zu Treueprogrammen und Aktionen.

Spezifikationen

Emissionsfrequenz	470 kHz ± 10 %
Ausgangsleistung	Max. 250 W
Display LCD-Touchscreen	10,4"
Kopplung	kapazativ
Betriebsmodi	Automatik & Manuell
Impedanzmessung	Automatisch
Temperatursteuerung	Automatisch
Temperaturanpassung	37 °C ÷ 45 °C ± 1 °C
Timer	Max. 60 Min. einstellb.
Netzspannung	220 VAC – 50 Hz
Abmessungen	68 x 61 x 117 cm (BxTxH)
Gewicht	15 kg
Sicherheitsklasse	Klasse 1 - Typ BF
Standardzubehör	
Handstücke	2x monopolar face and body and 1x bipolar
RET-Elektroden	1x handpiece and 1x plate
Isolierte Elektroden mit Temperatursensor (CCET)	8: ø 20, ø 30, ø 40, ø 60, ø 70, ø 80, ø 100 mm und Massage
Kosmetik	NuEra HF Creme



„Ein erheblicher Anteil erwachsener Frauen ist von Cellulite unterschiedlicher Ausprägung betroffen. Diese schnelle, komfortable, nicht invasive Behandlung bietet meinen Patientinnen die gewünschte Verbesserung des Erscheinungsbildes und garantiert Sicherheit durch APIC Temperatursteuerungstechnik.“

Edward M. Zimmerman MD, Nevada, USA

Warnhinweise und Risiken: NuEra darf bei Schwangeren, bei Patienten mit einer Infektion oder Erkrankung oder bei wärmeempfindlichen Personen nicht angewendet werden. Über Schnitt- und anderen Wunden, Piercings und Tätowierungen darf keine Behandlung durchgeführt werden. Bei Bereichen mit injizierbaren Füllpräparaten und Toxinen ist vor der Behandlung eine Wartezeit von einem Monat einzuhalten. Patienten mit einem Metallimplantat oder einem implantierten Medizinprodukt (z. B. einem Herzschrittmacher) müssen zuerst qualifizierten ärztlichen Rat einholen. Wenn es angemessen erscheint, ist die Rückelektrode in möglichst großem Abstand vom Implantat aufzusetzen. Lokale, orale oder systemische Anästhetika dürfen vor oder während der Behandlung nicht angewendet werden, denn die Patienten müssen regelmäßig Feedback geben, um ihr Wohlbefinden während der gesamten Behandlung zu gewährleisten. Sorgen Sie dafür, dass die Patienten keine metallischen Gegenstände berühren. Dies gilt insbesondere für Objekte, zu denen sie direkten Kontakt haben (z. B. das Bett). Eine vollständige Anwenderberatung ist immer empfehlenswert; umfassende Angaben zu Kontraindikationen und Risiken sind dem NuEra Benutzerhandbuch zu entnehmen.

Bios S.r.l.s.u.
Via Guido Rossa
10/12 - 20090
Vimodrone (MI) - Italien
Tel. +39 02 27304275
Fax +39 02 27304276
info@biosgroup.eu
www.biosgroup.eu

Lumenis (Germany) GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 3 D-63303
Dreieich-Dreieichenhain
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 6103 8335 0

EMEA
Dreieich-Dreieichenhain,
Deutschland
Tel.: +49 6103 8335 0
Fax: +49 6103 8335 300

Rom, Italien
Tel.: +39 06 90 75 230
Fax: +39 06 90 75 269

Hertfordshire, Großbritannien
Tel.: +44 20 8736 4110
Fax: +44 20 8736 4119

JAPAN
Tokio, Japan
Tel.: +81 3 6743 8300
Fax: +81 3 6743 8301

NORD- & LATEINAMERIKA
San Jose, CA, USA
Tel.: +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
Fax: +1 408 764 3999

ASIEN-PAZIFIK-RAUM
Peking, China
Tel.: +86 10 5737 6677
Fax: +86 10 5737 6767
Gurgaon, Indien
Tel.: +91 124 422 07 95
Kowloon, Hongkong
Tel.: +852 217 428 00
Fax: +852 272 251 51



Von der FDA
zugelassen

© LUMENIS LTD 2018

Weitere Informationen: www.lumenis.com

PB-2010621 Rev A